

MARISOL[®] *in* ectoin+ gel za nos

zaštita nosa od alergena

20 mL

*Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu jer ono sadrži za Vas važne informacije o primeni medicinskog sredstva **Marisol[®] IN ectoin+ gel**. Nakon čitanja, uputstvo sačuvajte, jer može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.*

Marisol[®] IN ectoin+ gel je medicinsko sredstvo koje vlaži nazalnu sluznicu i pruža joj zaštitu od alergena iz spoljašnje sredine, pa tako doprinosi ublažavanju simptoma alergijskog rinitisa i suve sluznice nosa.

Marisol[®] IN ectoin+ gel je formulisan na bazi prirodnog molekula, ektoina, koji ima sposobnost formiranja protektivnog hidratacionog sloja oko biomolekula, poznatijeg pod nazivom „ektoin-hidrokompleks“. Na površini nosne sluzokože ektoin formira postojanu mehaničku barijeru koja štiti epitel od alergena i drugih štetnih supstanci i jača barijeru funkciju tkiva, što se manifestuje smanjenjem ili potpunim odsustvom reakcije preosetljivosti na određeni alergen.

Takođe, ektoin doprinosi smanjenju prekomernog transepidermalnog gubitka vode i pruža dugotrajan efekat hidratacije, te pomaže kod stanja suve i nadražene sluzokože nosa. Ektoin dovodi i do smanjenja upale nosne sluznice izazvane alergijom, stabilizuje ćelijske membrane i doprinosi pravilnoj funkciji imunog sistema kože i sluzokože.

Zahvaljujući bioadhezivnim svojstvima podloge u koju je inkorporiran ektoin, barijeru delovanje **Marisol[®] IN ectoin+ gela** je potentnije, a samim tim i zaštita nosne sluznice od aeroalergena, mikroorganizama i toksina iz spoljašnje sredine. Bioadhezivni polimer dodatno doprinosi sprečavanju gubitka vlage iz tkiva i zajedno sa ektoinom stimuliše proces regeneracije nazalnog epitela.

Marisol[®] IN ectoin+ gel je namenjen za primenu kod odraslih i dece starije od godinu dana. Pogodan je za upotrebu tokom čitavog perioda sezone alergija, kao i u predsezoni, u cilju ostvarivanja preventivnog dejstva. Osim kod sezonskog alergijskog rinitisa, gel pruža zaštitu od alergena i kod nesezonskih, hroničnih alergijskih kijavica koje se javljaju tokom cele godine.

Kada se primenjuje **Marisol[®] IN ectoin+ gel**?

- ✓ Za prevenciju i ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa (kijavica, zapašen nos, sekrecija iz nosa, svrab i crvenilo nosa i očiju, suzenje očiju)
- ✓ Za tretman suve i nadražene nosne sluznice
- ✓ Tokom primene nazalnih kortikosteroida, u cilju prevencije nastanka suvoće i iritacije sluzokože nosa
- ✓ Tokom putovanja i boravka u prostorijama sa centralnim grejanjem i klima uređajima
- ✓ Za regeneraciju i ublažavanje iritacije kože oko nosa

Kako se upotrebljava Marisol® IN ectoin+ gel?

Marisol® IN ectoin+ gel aplikovati u obe nozdrve, tri do pet puta dnevno.

Odrasli: Vrh tube nežno uvući duboko u nozdrvu i pritiskom na tubu istisnuti malu količinu gela. Postupak ponoviti sa drugom nozdrvom. Lagano masirati obe strane nosa, kako bi se gel ravnomerno rasporedio unutar nozdrva.

Nakon primene, vrh tube treba obrisati. Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da koristi svoju tubu

Marisol® IN ectoin+ gela.

Deca: Gel istisnuti na štapić sa vatom, pažljivo ga uvući u nozdrvu deteta i naneti na nosnu sluznicu. Postupak ponoviti sa drugom nozdrvom.

Marisol® IN ectoin+ gel se preporučuje i za ublažavanje iritacije kože oko nosa, posebno u predelu ulaza u nosnice.

Kada ne treba primenjivati Marisol® IN ectoin+ gel:

Marisol® IN ectoin+ gel ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koji od sastojaka proizvoda. Ukoliko dođe do pojave alergijske reakcije na ovo medicinsko sredstvo, obustaviti primenu i obratiti se lekaru. Reakcije koje se mogu javiti su obično blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

Upozorenja i mere opreza za bezbednu primenu Marisol® IN ectoin+ gela:

Nakon operacije ili povrede nosa, **Marisol® IN ectoin+ gel** treba koristiti samo nakon konsultacije sa lekarom.

Kod dece gel koristiti uz prethodnu konsultaciju sa lekarom ili farmaceutom. Nema dostupnih podataka o štetnosti primene **Marisol® IN ectoin+ gela** u toku trudnoće i dojenja. Proizvod koristiti samo u originalnom pakovanju. Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Ne postoje druge posebne mere opreza kojih se treba pridržavati pri korišćenju **Marisol® IN ectoin+ gela**.

Pri preporučenom načinu primene, ne očekuje se pojava neželjenih efekata.

Kako čuvati medicinsko sredstvo Marisol® IN ectoin+ gel:

Marisol® IN ectoin+ gel čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine.

Pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi PE tuba koja sadrži 20 mL gela i uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva.

Šta sadrži medicinsko sredstvo Marisol® IN ectoin+ gel:

1 mL gela sadrži: 11,5 mg (1%) ektoina.

Pomoćne supstance: karbomer; glicerol; trietanolamin; boja: eozin; voda, prečišćena.

Datum izdavanja uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: april 2021.

Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva: 515-02-01944-21-004 od 06.07.2021.

Proizvođač medicinskog sredstva: ESENSA d.o.o.,

Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom iz Srbije na broj:


0800 200 300 ili putem e-mail-a: informacije@esensa.rs

SRB



www.esensa.rs

105,0 mm

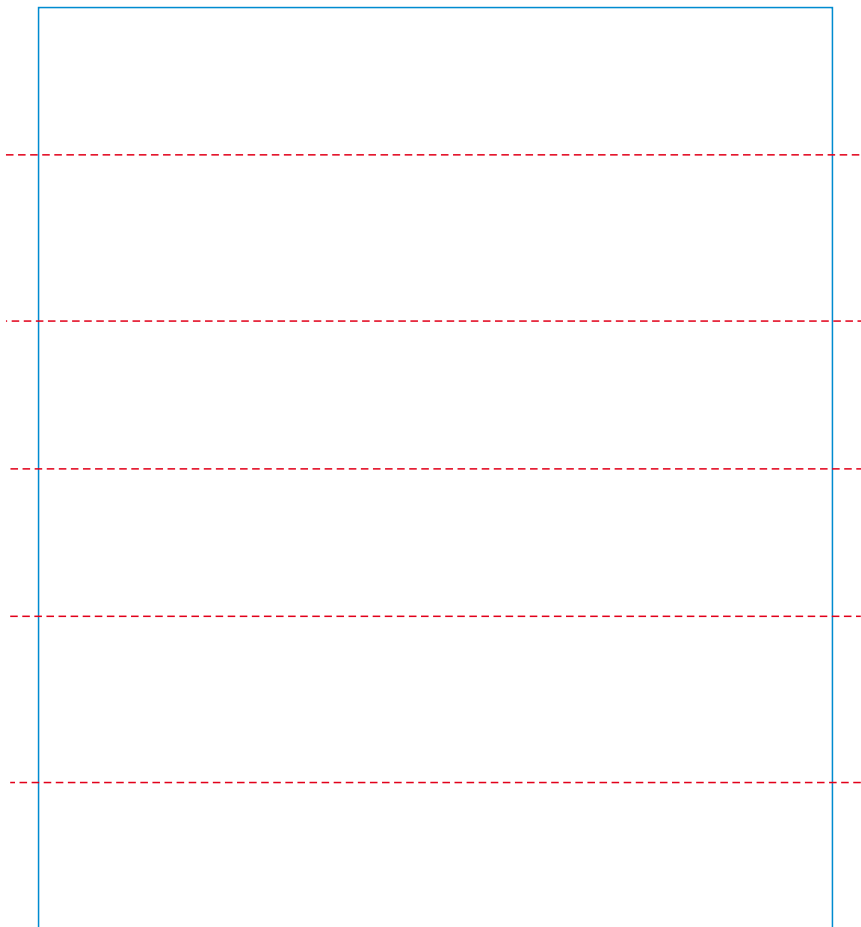

122 mm